



항체 사용량 80% 감소

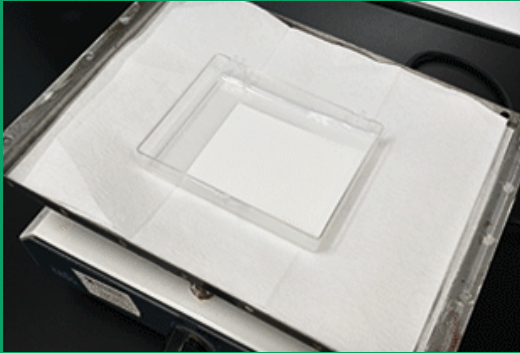

기존 방식

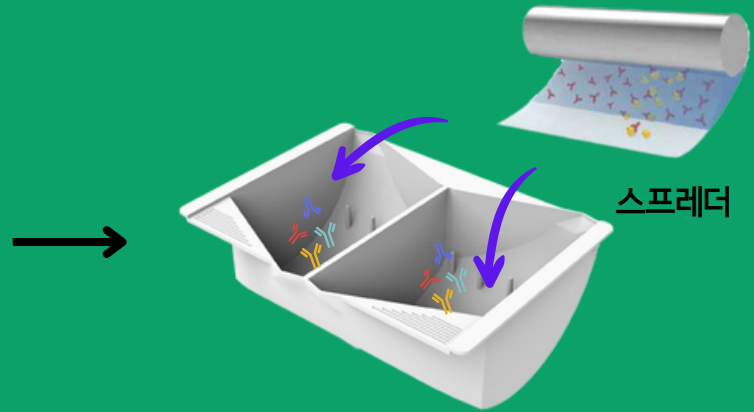

OptiBind™ Technology

논문으로 검증된
전용 용기 + 스프레더 사용으로
항체 반응 효율을 최대로 증대

DOI10.1002/elps.202000380



12rpm / 45° (±)

Mini size



1칸 size : 8.5 X 7.5 cm

Ultra mini size



1칸 size : 8.5 X 3.5 cm

Antibody Binder

전용락커에 반응용기 '2개' 장착가능

사용 예시

1. 비용 절감을 원하시는 경우 (예시)


	Manual 방식	OptiBind™ 이용
항체 처리량	1: 1000으로 희석한 항체 10 ml	1: 1000으로 희석한 항체 2 ml
반응 시간	1 h	1 h
결과	Manual $\approx$ OptiBind™	

2. 시간 단축을 원하시는 경우 (예시)


	Manual 방식	OptiBind™ 이용
항체 처리량	1: 1000으로 희석한 항체 10 ml	1: 200으로 희석한 항체 2 ml
반응 시간	1 h	15 min
결과	Manual $\approx$ OptiBind™	

3. 높은 효율의 결과 확인을 원하시는 경우 (예시)

	Manual 방식	OptiBind™ 이용
항체 처리량	1:1000으로 희석한 항체 10 ml	1: 200으로 희석한 항체 2 ml
반응 시간	5~45 min	5~45min
결과	Manual $<$ OptiBind™	

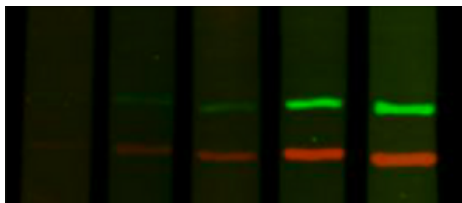

Manual 방식

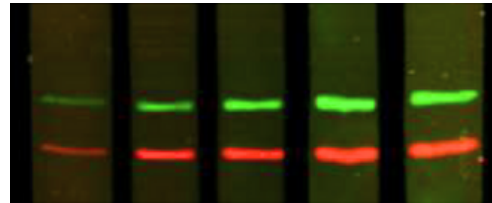

OptiBind™ 방식

- ROTATOR
- ROCKER
- SHAKER

이 모든 것을 합치고
항체 양까지 줄여주는

- 냉장 가능



CDR Binder Plus